

# HENRY SCHEIN® ONE STEP



## HCG URINE TEST • PREGNANCY TEST

### Test HCG • de embarazo

### HCG test urinaire • de grossesse

### HCG Test • Schwangerschaftstest

9008561 Strip Test/tira de prueba/bandelettes de test/Teststreifen

9008562 Cassette Test/casete de prueba/test de la cassette/Testkassette


9008563 Midstream/Medio de la corriente de prueba/mi-chemin de test/Midstream-Test



#### CB One Step HCG Urine Test

One Step HCG Urine Test is a rapid pregnancy test, which you can easily carry out yourself. It detects the presence of human chorionic gonadotropin ("hCG"), which appears in urine very early during pregnancy. For external use only. For professional use only.

**HOW DOES IT WORK?**  
Human chorionic gonadotropin (hCG) is a hormone, produced by the developing placenta shortly after the conception and secreted into the urine. The pregnancy test contains antibodies which specifically react with this hormone.  
When the strip is immersed into a urine specimen, capillary action carries the specimen to migrate along the membrane. When hCG in the sample reaches the test zone region of the membrane, it will form a coloured line. Absence of this coloured line suggests a negative result.  
To serve as a procedure control, a coloured line will appear at the control zone region, if the test has been correctly performed.

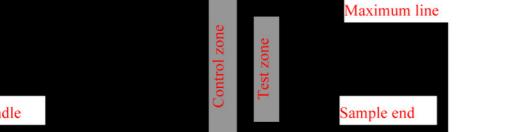

#### CONTENT OF THE TEST KIT

1. 1 x pouch containing a reaction strip and a desiccant. The desiccant is for storage purposes only, and is not used in the test procedures.
2. Instructions for use.

#### WHAT ELSE IS REQUIRED?

1. A clean, dry, plastic or glass container to collect the urine.
2. Timer (watch or clock)

#### SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

##### WHEN TO COLLECT URINE FOR THE TEST?

Any urine specimen is appropriate for pregnancy testing but the first morning urine specimen is optimal because of its highest concentration of HCG.


##### HOW TO COLLECT URINE?

Urine specimens may be collected in any clean, dry, plastic or glass container.

#### 9008561 – HS One Step Pregnancy urine strip test

##### HOW TO DO THE TEST?

1. The test strip and urine have to be at room temperature (15-30°C) for testing.
2. Remove the test strip from the sealed pouch.
3. Do not urinate past the arrow mark and not passed the arrow mark. Take the strip out after 3 seconds and lay the strip flat on a clean, dry, non-absorbent surface (such as the edge of the urine container).
4. Positive results may be observed at around 1 minute. However, to confirm negative results, the complete reaction time of 3 minutes is required. Do not read results after 5 minutes as they may be inaccurate.

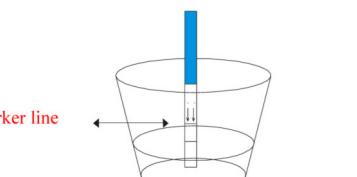

#### HOW TO READ THE RESULTS

##### Negative (not pregnant):

Only one colour band appears, in the control zone. No apparent band on the test zone. This indicates that no pregnancy has been detected.

##### Positive (pregnant):

Distinct colour bands appear in the control and test zones. It indicates that you are pregnant. The colour intensity of the test bands may vary since different stages of pregnancy have different concentrations of hCG hormone.

##### Invalid:

No visible band at all, or there is a visible band only in the test region but not in the control region. Repeat with a new test kit. If test still fails, please contact the distributor, where you bought the product, with the lot number.



NOTE: if the colour in the test zone is weak, it is recommended that the test be repeated in 48 hours.

#### 9008562 – HS One Step Pregnancy urine cassette test

##### HOW TO DO THE TEST?

1. Remove a testing device from the foil pouch by tearing at the notch and place it on a level surface.
2. Holding a sample dropper vertically, add exactly four drops of the urine specimen to the sample well (with an arrow marked).
3. Positive results may be observed at around 1 minute. However, to confirm negative results, the complete reaction time of 3 minutes is required. Do not read results after 5 minutes as the results may be inaccurate.



#### HOW TO READ THE RESULTS?

##### Negative (not pregnant):

Only one colour band appears, in the control zone. No apparent band on the test zone. This indicates that no pregnancy has been detected.

##### Positive (pregnant):

Distinct colour bands appear in the control and test zones. It indicates that you are pregnant. The colour intensity of the test bands may vary since different stages of pregnancy have different concentrations of hCG hormone.

##### Invalid:

No visible band at all, or there is a visible band only in the test region but not in the control region. Repeat with a new test kit. If test still fails, please contact the distributor, where you bought the product, with the lot number.

To serve as a procedure control, a coloured line will appear at the control zone region, if the test has been correctly performed.




NOTE: if the colour in the test zone is weak, it is recommended that the test be repeated in 48 hours.

#### 9008563 – HS One Step Pregnancy urine midstream test

##### HOW TO DO THE TEST?

1. To begin testing, open the sealed pouch by tearing along the notch. Remove test device--midstream from the pouch.
2. Hold the round end of cover with one hand. Use the other hand to pull out the midstream cap and expose the absorbent.
3. Point the absorbent tip downward; place the absorbent tip in urine stream for at least 10 seconds to be thoroughly wet. Do not urinate past the arrow mark. Otherwise, you can collect your urine into a clean cup and dip half of the absorbent pad into the urine for at least 3 seconds.
4. Re-cap the device and wait for colour bands to appear. Positive results may be observed at around 1 minute. However, to confirm negative results, the complete reaction time of 3 minutes is required. Do not read results after 5 minutes as the results may be inaccurate.

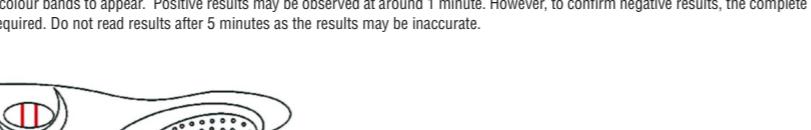

#### HOW TO READ THE RESULTS?

##### Negative (not pregnant):


Only one colour band appears, in the control zone. No apparent band on the test zone. This indicates that no pregnancy has been detected.

##### Positive (pregnant):

Distinct colour bands appear in the control and test zones. It indicates that you are pregnant. The colour intensity of the test bands may vary since different stages of pregnancy have different concentrations of hCG hormone.

##### Invalid:

No visible band at all, or there is a visible band only in the test region but not in the control region. Repeat with a new test kit. If test still fails, please contact the distributor, where you bought the product, with the lot number.

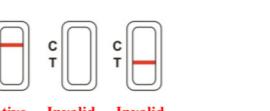

NOTE: if the colour in the test zone is weak, it is recommended that the test be repeated in 48 hours.

#### WHAT TO DO WHEN YOU KNOW THE RESULT

##### IF THE RESULT IS POSITIVE (TWO LINES)

Consult your physician. He should confirm your pregnancy after evaluating all clinical and laboratory findings. Indeed, in certain conditions, the test may give a false positive result. He will also give you further information and advice on your pregnancy.

See also "Limitations".

##### IF THE RESULT IS NEGATIVE (1 LINE)

If you have reasons to believe that you are pregnant (e.g. no menstrual bleeding), you can repeat the test a few days later. If the test is still negative, consult your physician. See also "Limitations".

##### Invalid:

No visible band at all, or there is a visible band only in the test region but not in the control region. Repeat with a new test kit. If test still fails, please contact the distributor, where you bought the product, with the lot number.

See also "Limitations".

#### LIMITACIONES

1. As it is with any diagnostic procedure, a confirmed pregnancy diagnosis should only be made by a physician after evaluating all clinical and laboratory findings.
2. If a urine sample is too dilute (i.e., low specific gravity) it may not contain a representative level of hCG. If pregnancy is still suspected, another urine specimen should be collected 48 hours later and tested.
3. Low concentration of hCG in a very early pregnancy can give a negative result. In this case, another specimen should be obtained at least 48 hours later and tested.
4. Elevated levels of hCG can be caused by a few conditions other than pregnancy. Therefore, the presence of hCG in urine specimen should not be used to diagnose pregnancy unless these conditions have been ruled out.
5. A normal pregnancy cannot be distinguished from an ectopic pregnancy based on hCG levels alone. Also, spontaneous miscarriage may cause confusion in interpreting test results.
6. Sterility treatments, based on hCG, may cause false results. Consult your physician.

#### EXPECTED RESULTS

Negative results are expected in healthy non-pregnant women and healthy men. Although the hCG levels in normal early pregnant women are variable, One Step HCG Urine Test is capable of detecting pregnancy as early as 1 day after the first missed menses.

#### NOTA: Si el color en la zona de test es débil, se recomienda repetir el test en 48h.

#### 9008562 – HS Test de embarazo One-Step

Un resultado negativo es lo que se espera en una mujer sana no embarazada. Aunque los niveles de cgh en mujeres embarazadas normales son variables. El test de embarazo One-Step es capaz de detectar el embarazo con un solo dia embarazo.

#### PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Retire el equipo de pruebas de la bolsa rasgando la punta y poniéndolo en una superficie nivelada.
2. ¿Pueden los resultados interpretarse en más de 5 minutos? No. Los resultados deben de leerse en menos de 5 minutos. Aunque un resultado positivo puede no cambiar en días, un resultado negativo puede cambiar a falso positivo dentro del periodo de prueba, lo que dará una lectura errónea. Siempre es mejor probar los resultados en 5 minutos y luego descartarlo para evitar confusiones.
3. Los resultados positivos se pueden ver en 1 minuto. Pero para confirmar resultados negativos la reacción completa dura 3 minutos. No lea los resultados después de 5 minutos.



#### ES Un Paso GCH Test en Orina

El test de detección de GCH en Orina es un test de embarazo rápido que puede realizarlo usted mismo. Detecta la presencia de la hormona gonadotropina coriónica ("HCG"), que aparece en la orina muy pronto durante el embarazo. Sólo para uso in-vitro. Sólo uso externo.

##### COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

L'hormone humaine Gonadotrophine chorionique (hCG) est une hormone produite par le placenta au cours de sa phase de développement peu après la conception et sécrétée dans l'urine. Le test de grossesse contient des anticorps qui réagissent avec cette hormone.

Cuando la tira se sumerge en una muestra de orina, la acción capilar hace que la muestra migre por la membrana. Cuando el GCH en la muestra llega la zona de pruebas de la membrana, forma una línea de color. La ausencia de esta línea sugiere un resultado negativo.

Como control del procedimiento, una línea de color aparece en la zona de control si el test se ha realizado correctamente.



NOTE: Si el color en la zona de test es débil, se recomienda repetir el test en 48h.

#### 9008563 – HS Test de embarazo por micción limpia One-Step

##### CONTENUDOS DEL KIT DE PRUEBAS

1. Una bolsa que contiene una tira reactiva y un secante. El secante es sólo para cuando se ha guardado y no se usa en el procedimiento del test.
2. Le prospectus avec les instructions pour usage.

##### QUE MÁS NECESITA?

1. Una pipeta propia, seca, en plástico o en vidrio destinada a recoger la orina.
2. Temporizador (reloj o cronómetro)

##### RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

##### CUANDO SE RECOGE LA ORINA PARA EL TEST?

Cualquier muestra de orina es válida para probar el embarazo pero la muestra de la orina de primera hora de la mañana es la mejor porque tiene mayor concentración de GCH.

##### CUÓMO RECOPILAR LA ORINA?

Las muestras de orina se recogen en un vaso de plástico o cristal limpio.



NOTE: Si el color en la zona de test es débil, se recomienda repetir el test en 48h.

#### 9008561 – HS Tiras reactivas embarazo One Step

##### COMENT EFEKTUER LE TEST?

1. La tira del test y la orina deben de estar a temperatura ambiente (15-30° C) para el test.
2. Retire la tira del test de la bolsa.

Aparecen bandas distintivas de color en la zona de control y prueba. Esto indica que está embarazada. La intensidad del color de las bandas de color puede variar ya que las diferentes etapas del embarazo tienen diferentes concentraciones de hormona GCH.

##### INVALID:

No hay ninguna banda visible o hay una banda visible en la zona de prueba pero no en la de control. Repita con un nuevo kit de test. Si el test sigue fallando, contacte con su distribuidor o tienda donde ha comprado el producto con el número de lote.



NOTE: Si el color en la zona de test es débil, se recomienda repetir el test en 48h.

#### ¿QUÉ HACER CUANDO SE SABEN LOS RESULTADOS?

##### Negativo: (No embarazada):

Sólo aparece una banda de color en la zona de control. No hay banda en la zona de prueba. Esto indica que no se ha detectado embarazo. Consulte con su médico. Él lo confirmará su embarazo después de evaluar todas las pruebas clínicas y de laboratorio. De hecho bajo ciertas circunstancias el test puede dar un falso positivo. Él también le dará más información y consejos sobre su embarazo. Ver "Limitaciones".

##### Positivo (Embarazada):

Aparecen bandas distintivas de color en la zona de control y prueba. Esto indica que está embarazada. La intensidad del color de las bandas de color puede variar ya que las diferentes etapas del embarazo tienen diferentes concentraciones de hormona CGH.

##### SI EL RESULTADO ES NEGATIVO (1 LÍNEA)

Si tiene razones para creer que está embarazada (como por ejemplo no tener menstruación), puede repetir el test unos días después. Si el resultado sigue siendo negativo acuda a su médico. Ver "Limitaciones".

#### LIMITACIONES

1. Como sucede con cualquier diagnóstico, un embarazo confirmado sólo puede ser hecho por un doctor después de evaluar todas las pruebas clínicas y de laboratorio.
2. Si la muestra de orina está muy diluida (poca gravedad específica) puede no contener un nivel representativo de CGH. Si aún se sospecha de un embarazo,

## COMMENT LIRE LES RESULTATS ?

Négatif (pas enceinte):


Apparition d'une bande de couleur dans la zone de test. Aucune bande apparente sur la zone de test. Ceci indique qu'aucune grossesse n'a été détectée.

Positif (enceinte):

Les bandes distinctes de couleur apparaissent dans les zones de test II indique que vous êtes enceinte. L'intensité de couleur des bandes de contrôle peut varier puisque les étapes différentes de grossesse ont des niveaux de concentrations d'hormone HCG différents.

Non valable :

Aucune bande visible à tous, ou il y a une bande visible seulement dans la zone de test mais pas dans la région de contrôle. Répéter avec un nouveau kit de test. Si le test échoue toujours, veuillez contacter le distributeur ou le magasin, où vous avez acheté le produit, avec le numéro de lot.

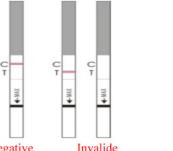


LA NOTE : si la couleur dans la zone de test est faible, il est recommandé que le contrôle soit répété au bout de 48 heures.

## 9008562 – Test HS d'urine pour test de Grossesse

### COMMENT EFFECTUER LE CONTROLE ?

1. Enlever le dispositif de contrôle de la poche de papier d'aluminium en déchirant au niveau de l'encoche puis placez le sur une surface égale.
2. Tenir un compte-gouttes d'échantillon à la verticale, ajouter exactement quatre doses de l'échantillon d'urine (en contrôlant la flèche marquée).
3. Les résultats positifs pourraient être observés au bout d'une minute. Toutefois, la confirmation des résultats négatifs, exige un temps de réaction de 3 minutes.

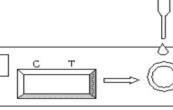

### COMMENT LIRE LES RESULTATS ?

Négatif (pas enceinte):


Apparition d'une bande de couleur dans la zone de test. Aucune bande apparente sur la zone de test. Ceci indique qu'aucune grossesse n'a été détectée.

Positif (enceinte):

Les bandes distinctes de couleur apparaissent dans les zones de test II indique que vous êtes enceinte. L'intensité de couleur des bandes de contrôle peut varier puisque les étapes différentes de grossesse ont des niveaux de concentrations d'hormone HCG différents.

Non valable :

Aucune bande visible à tous, ou il y a une bande visible seulement dans la zone de test mais pas dans la région de contrôle. Répéter avec un nouveau kit de test. Si le test échoue toujours, veuillez contacter le distributeur ou le magasin, où vous avez acheté le produit, avec le numéro de lot.

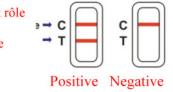

LA NOTE : si la couleur dans la zone de test est faible, il est recommandé que le contrôle soit répété au bout de 48 heures.

## 9008563 – Test HS d'urine pour test de Grossesse

### HOW TO DO THE TEST?

1. To begin testing, open the sealed pouch by tearing along the notch. Remove test device--midstream from the pouch.
2. Hold the round end of cover with one hand. Use the other hand to pull out the midstream cap and expose the absorbent.
3. Point the absorbent tip downward; place the absorbent tip in urine stream for at least 10 seconds to thoroughly wet. Do not urinate past the arrow mark. Otherwise, you can collect your urine into a clean cup and dip half of the absorbent pad into the urine for at least 3 seconds.
4. Re-cap the device and wait for color bands to appear. Positive results may be observed in as soon as 1 minute. However, to confirm negative results, the complete reaction time of 3 minutes is required. Do not read results after 5 minutes.

### COMMENT EFFECTUER LE TEST ?

1. Pour commencer le test, ouvrez la poche scellée en déchirant le long de l'encoche. Ôtez le dispositif de contrôle -- au milieu du courant de la poche.
2. Tenir l'extrême cirulaire de couverture avec une main. Utiliser l'autre main pour retirer le bouchon au milieu du courant et exposer l'absorbant.
3. Indiquer le point absorbant descendante : placer le point absorbant dans le flot d'urine pendant au minimum 10 seconde afin qu'il soit imbibé au maximum. Evitez que le niveau d'urine soit au dessus de la marque de la flèche. Autrement, vous pouvez également recueillir votre urine dans une pipette propre et Trempez la moitié du tampon absorbant dans l'urine pendant au moins 3 secondes.
4. Récupérez le dispositif et attendez l'apparition des bandes de couleur. Les résultats positifs pourraient être observés au bout d'une minute. Toutefois, la confirmation des résultats négatifs, exige un temps de réaction de 3 minute. Ne lisez pas des résultats au bout de 5 minutes.



### COMMENT LIRE LES RESULTATS ?

Négatif (pas enceinte):

Apparition d'une bande de couleur dans la zone de test. Aucune bande apparente sur la zone de test. Ceci indique qu'aucune grossesse n'a été détectée.

Positif (enceinte):

Les bandes distinctes de couleur apparaissent dans les zones de test II indique que vous êtes enceinte. L'intensité de couleur des bandes de contrôle peut varier puisque les étapes différentes de grossesse ont des niveaux de concentrations d'hormone HCG différents.

Non valable :

Aucune bande visible à tous, ou il y a une bande visible seulement dans la zone de test mais pas dans la région de contrôle. Répéter avec un nouveau kit de test. Si le test échoue toujours, veuillez contacter le distributeur ou le magasin, où vous avez acheté le produit, avec le numéro de lot.



LA NOTE : si la couleur dans la zone de test est faible, il est recommandé que le contrôle soit répété au bout de 48 heures.

## QUE FAIRE LORSQUE VOUS ÊTES EN POSSESSION DU RÉSULTAT

### SI LE RÉSULTAT EST POSITIF (DEUX LIGNES)

Consulter votre médecin. Il devrait confirmer votre grossesse après avoir évalué toutes conclusions cliniques et de tests de laboratoire. En effet, dans certaines conditions, le contrôle peut donner un résultat positif erroné. Il vous donnera également de plus amples informations et conseils sur votre grossesse. Voir aussi des « Limitations ».

## SI LE RÉSULTAT EST NÉGATIF (LIGNE)

Si vous avez des raisons pour croire que vous êtes enceinte (par exemple aucune menstruation), vous pouvez répéter le test quelques jours plus tard. Si le test est toujours négatif, consulter votre médecin. Voir aussi des « Limitations ».

### LIMITATIONS

1. Comme lors de n'importe quelle procédure de diagnostic, un test de grossesse confirmé ne devrait être effectué uniquement que par un médecin après avoir évalué de toutes les conclusions cliniques et de laboratoire.
2. Si un échantillon d'urine est trop dilué (c.-à-d., taux de gravité spécifique bas) il ne peut pas contenir un niveau représentatif de hCG. Si vous êtes toujours convaincu d'être enceinte, un autre échantillon d'urine devrait être recueilli 48 heures plus tard et testé.
3. Un faible taux de concentration en hCG en début de grossesse peut donner un résultat négatif. Dans ce cas, un autre échantillon devrait être prélevé 48 heures plus tard et ensuite testé.
4. Les taux élevés de hCG peuvent être causés par quelques conditions autres que la grossesse. Donc, la présence de hCG dans l'échantillon d'urine ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer la grossesse à moins que cette condition ait été éliminée.
5. Une grossesse normale ne peut pas être distinguée d'une grossesse extra-utérine en se basant uniquement sur les taux de hCG. Aussi, la fausse-couche spontanée peut causer la confusion dans l'interprétation de résultats de test.
6. Les traitements de stérilité, fondés sur hCG, peuvent causer des résultats erronés. Consulter votre médecin.

### RESULTATS PREVUS

Les résultats négatifs sont prévus chez les hommes sains, femmes non enceintes et en bonne santé. Bien que les niveaux de hCG en début de grossesse soient variables, le test d'urine HCG est capable de détecter de grossesse après un retard des règles.

### QUESTIONS & REPONSES

1. Il y a beaucoup de différences entre les lignes de contrôle de deux tests. Es-ce une inquiétude? Le nombre de Variation dans la couleur de la bande de test n'affectera pas le résultat du test.
2. Les résultats des tests peuvent ils être interprétés après un intervalle de temps supérieur à cinq minutes? Non, les résultats du test doivent être lus dans 5 minutes. Bien qu'un résultat positif ne devrait pas changer pendant plusieurs jours, un résultat négatif peut changer vers un faux positif quelques minutes après la fin de la période de test ce qui correspondrait à une lecture imprécise. L'idéal est de lire les résultats 5 minutes après la période de test et ensuite jeter le test pour éviter la confusion.
3. Une couleur d'arrière-plan mignardise et stries verticales ont semblé dans le domaine de résultat pendant la période contrôlante. Es-ce une inquiétude? Non. Chaque échantillon d'urine variera dans son maquillage chimique, en fonction du taux d'humidité de l'air dans la salle de test (la salle). Telles variation des conditions physiques peuvent causer des stries et/ou vertical la couleur d'arrière-plan de rose-mignardise mais n'affecteront pas les résultats du test. Pourvu que la bande de contrôle apparaisse dans les cinq minutes, le test s'est executé convenablement.

## HS One Step HCG Urin Test

### HOE WERKT HET?

Human chorionic gonadotropin (HCG) est un hormone dat vlak na de conception geproduceerd wordt door de zich ontwikkelende placenta en wordt afgescheiden in de urine. De zwangerschapstest bewerkt antilichamen die specifiek gevoelig zijn voor dit hormoon. Wanneer de teststrip in een urinemonster is gedoopt, ontstaat een capillaire werking. Als HCG aanwezig is vindt er een reactie plaats tussen het HCG en in de teststrip aanwezige stoffen, er zal dan een gekleurde lijn verschijnen in het testveld. Afwezigheid van deze lijn betekent dat het resultaat negatief is.

### WIE MUSS MAN DAS ERGEBNIS ABLESEN?

Negativ (nicht schwanger):

Nur eine farbige Linie erscheint im Kontrollfeld (C) jedoch keine wahrnehmbare Linie im Testfeld (T). Dies deutet darauf hin, dass keine Schwangerschaft festgestellt wurde.

Positiv (schwanger):

Eine deutliche farbige Linie wird sowohl im Kontrollfeld (C) als auch im Testfeld (T) sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Die Farbintensität des Teststreifens kann variieren, da verschiedene Stadien der Schwangerschaft eine unterschiedliche Konzentration der hCG Hormone aufweisen.

### UNGÜLTIG:

Ist es weder im Testfeld (T) noch im Kontrollfeld (C) eine farbige Linie zu erkennen oder es ist nur eine farbige Linie im Testfeld (T), aber nicht in dem Kontrollfeld (C) vorhanden. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit. Falls der Test weiterhin fehlschlägt, kontaktieren Sie bitte den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, unter Bekanntgabe der Chargennummer.

## Inhoud van de testkit

### HOE WERKT DE TESTKIT?

Der HS One Step HCG Test ist ein einfacher anwendbar Schwangerschaftstest. Er stellt das Vorhandensein von humanem Choriongonadotropin (hCG) fest, welches bereits sehr früh während einer Schwangerschaft im Urin nachzuweisen ist. Nur für den in-vitro Test. Nur für den externen Gebrauch.

### FUNKTIONSWEISE

Humanes Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das von der sich entwickelnden Plazenta produziert und schon kurz nach der Empfängnis mit dem Urin ausgeschieden wird. Der Schwangerschaftstest beinhaltet Antikörper, die gezielt mit diesem Hormon reagieren.

Wenn der Streifen in die Urinprobe eingetaucht wird, fließt die Probe durch die Kapillarwirkung an der Membran entlang. Wenn hCG in der Probe die Testregion auf dem Membran erreicht, entsteht eine farbige Linie. Ein Fehlen dieser farbigen Linie weist es auf ein negatives Ergebnis hin.

Wenn der Test richtig ausgeführt wurde, wird als Prozesskontrolle eine farbige Linie in der Kontrollzone angezeigt.

## DE HS One Step HCG Urin Test

### HOE WERKT HET?

Human chorionic gonadotropin (HCG) is een hormoon dat vlak na de concepcie geproduceerd wordt door de zich ontwikkelende placenta en wordt afgescheiden in de urine. De zwangerschapstest bewerkt antilichamen die specifiek gevoelig zijn voor dit hormoon. Wanneer de teststrip in een urinemonster is gedoopt, ontstaat een capillaire werking. Als HCG aanwezig is vindt er een reactie plaats tussen het HCG en in de teststrip aanwezige stoffen, er zal dan een gekleurde lijn verschijnen in het testveld. Afwezigheid van deze lijn betekent dat het resultaat negatief is.

### WIE MUSS MAN DAS ERGEBNIS ABLESEN?

Negativ (nicht schwanger):

Nur eine farbige Linie erscheint im Kontrollfeld (C) jedoch keine wahrnehmbare Linie im Testfeld (T). Dies deutet darauf hin, dass keine Schwangerschaft festgestellt wurde.

Positiv (schwanger):

Eine deutliche farbige Linie wird sowohl im Kontrollfeld (C) als auch im Testfeld (T) sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Die Farbintensität des Teststreifens kann variieren, da verschiedene Stadien der Schwangerschaft eine unterschiedliche Konzentration der hCG Hormone aufweisen.

### UNGÜLTIG:

Ist es weder im Testfeld (T) noch im Kontrollfeld (C) eine farbige Linie zu erkennen oder es ist nur eine farbige Linie im Testfeld (T), aber nicht in dem Kontrollfeld (C) vorhanden. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit. Falls der Test weiterhin fehlschlägt, kontaktieren Sie bitte den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, unter Bekanntgabe der Chargennummer.

## Inhoud van de testkit

### HOE WERKT DE TESTKIT?

Der HS One Step HCG Test ist ein einfacher anwendbar Schwangerschaftstest. Er stellt das Vorhandensein von humanem Choriongonadotropin (hCG) fest, welches bereits sehr früh während einer Schwangerschaft im Urin nachzuweisen ist. Nur für den in-vitro Test. Nur für den externen Gebrauch.

### FUNKTIONSWEISE

Humanes Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das von der sich entwickelnden Plazenta produziert und schon kurz nach der Empfängnis mit dem Urin ausgeschieden wird. Der Schwangerschaftstest beinhaltet Antikörper, die gezielt mit diesem Hormon reagieren.

Wenn der Streifen in die Urinprobe eingetaucht wird, fließt die Probe durch die Kapillarwirkung an der Membran entlang. Wenn hCG in der Probe die Testregion auf dem Membran erreicht, entsteht eine farbige Linie. Ein Fehlen dieser farbigen Linie weist es auf ein negatives Ergebnis hin.

Wenn der Test richtig ausgeführt wurde, wird als Prozesskontrolle eine farbige Linie in der Kontrollzone angezeigt.

## HS One Step HCG Urin Test

### HOE WERKT HET?

Human chorionic gonadotropin (HCG) is een hormoon dat vlak na de concepcie geproduceerd wordt door de zich ontwikkelende placenta en wordt afgescheiden in de urine. De zwangerschapstest bewerkt antilichamen die specifiek gevoelig zijn voor dit hormoon. Wanneer de teststrip in een urinemonster is gedoopt, ontstaat een capillaire werking. Als HCG aanwezig is vindt er een reactie plaats tussen het HCG en in de teststrip aanwezige stoffen, er zal dan een gekleurde lijn verschijnen in het testveld. Afwezigheid van deze lijn betekent dat het resultaat negatief is.

### WIE MUSS MAN DAS ERGEBNIS ABLESEN?

Negativ (nicht schwanger):

Nur eine farbige Linie erscheint im Kontrollfeld (C) jedoch keine wahrnehmbare Linie im Testfeld (T). Dies deutet darauf hin, dass keine Schwangerschaft festgestellt wurde.

Positiv (schwanger):

Eine deutliche farbige Linie wird sowohl im Kontrollfeld (C) als auch im Testfeld (T) sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Die Farbintensität des Teststreifens kann variieren, da verschiedene Stadien der Schwangerschaft eine unterschiedliche Konzentration der hCG Hormone aufweisen.

### UNGÜLTIG:

Ist es weder im Testfeld (T) noch im Kontrollfeld (C) eine farbige Linie zu erkennen oder es ist nur eine farbige Linie im Testfeld (T), aber nicht in dem Kontrollfeld (C) vorhanden. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit. Falls der Test weiterhin fehlschlägt, kontaktieren Sie bitte den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, unter Bekanntgabe der Chargennummer.

## HS One Step HCG Urin Test

### HOE WERKT HET?

Human chorionic gonadotropin (HCG) is een hormoon dat vlak na de concepcie geproduceerd wordt door de zich ontwikkelende placenta en wordt afgescheiden in de urine. De zwangerschapstest bewerkt antilichamen die specifiek gevoelig zijn voor dit hormoon. Wanneer de teststrip in een urinemonster is gedoopt, ontstaat een capillaire werking. Als HCG aanwezig is vindt